



Vi nærer stor tillid til vores produkt! Derfor yder vi 3 års reklamationsret på alle de elektriske og mekaniske dele.

2012 MODEL

Tekniske data



Patientløft:	max 250 kg
Indsidningshøjde:	55 cm
Rotation:	180°
Max arbejdshøjde målt til hæl:	145 cm
Totallængde som leje:	200 cm
Lægstøtte, trinløs:	max 7,5 cm
Benstøtter, udtræk:	20 cm
Sædevinkel:	-4° til +20°

Benstøtter kan justeres 10° til hver side
Armlænhøjde kan justeres 9 cm
Afstand mellem armlæn (std): 58 cm

Stolens egenvægt: 135 kg
El - tilslutning: 230 V med jord

Scan og få mere info



TOFI aps

Birkemosevej 10
5471 Søndersø
Tlf.: 4839 2430
kontakt@tofistol.dk



Tofistolen har fået endnu et løft

Nu i tæt samarbejde med BC-Teknik, som har mange års erfaring med reparation af bl.a. behandlerstole

Justeres optimalt i alle led

Nakkestøtten justeres ind efter hver enkelt klient, ligesom stolens andre bevægelige dele, eksempelvis armlæn.

Sikker på fødderne

Fodplade m/vacuumformet plastkappe. Gevindhuller til evt. fastgørelse til gulv eller montering af justérbare fødder. Stolen kan også leveres uden fodpladen til direkte fastgørelse i gulvet.

Stolen leveres i flere farver

Polstringer til TOFI-stolen kan naturligvis leveres i flere farvevarianter. Spørg blot for at se hele udvalget af farveprøver.



2012 MODEL

Betjening lige ved hånden

Trådløs håndbetjening med 8 funktioner. Ergonomisk design og en slidstærk overflade. Håndbetjeningen fastgøres nemt med den gummibelagte magnet til enhver metalflade.



Og trådløs fodbetjening

Skridsikker belægning på hele undersiden. Markedets mindste 8-funktions fodbetjening. Der er ligeledes mulighed for at koble flere betjeninger til hver stol.




Flere fordele ved betjeningen

Stolens styring sikrer motorerne mod overbelastning og med kun én ledning til stolen (takket være al den trådløse betjening) er risikoen for ulykker minimeret.

Justérbare benstøtter

Kan forlænges, skubbes fra hinanden, løftes og forhøjes.

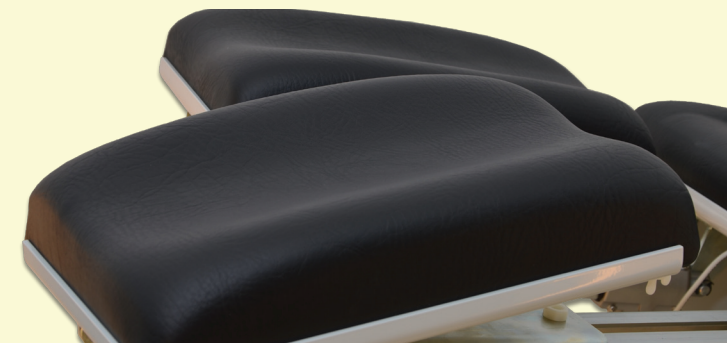

Trådløs alt-i-én RF-control med 8 funktioner



Ergonomisk Brugervenlig

Slidstærkt kontaktfolie der
også er rengøringsvenligt

Betjeningsmuligheder:

- Benstøtter op/ned
(enkeltvis eller samtidigt)
- Søjle op/ned
- Sædetilt op/ned
(Fællesknapper betjener oven-
nævnte 3 funktioner samtidigt)
- Ryg op/ned
- Bremse til/fra

Batteri-indikator
2 stk. knapceller
CR2032 Lithium
knapceller (medfølger)

RF kontrollen er enkel at arbejde med.
Fastgøres nemt med gummibelagt
magnet til metal-overflade.

Galvaniseret metal fodplade med
vacuumformet plastkappe.

Forsynet med
4 stk. 8 mm gevindhuller til
evt. fastgørelse til gulv eller montering
af nivelleringsfødder til
ikke plant underlag.
Kan også leveres uden store fodplade
til direkte fastgørelse
til underlag.
Betræk leveres i standardfarver.

Stolen er let at rengøre, idet alle
komponenter er placeret under
stolessæde samt ryg.
Dermed er det kun de store udvendige
overflader, der kræver aftørring.

Betræk rengøres dagligt med
Nevotex Vinylrens (1%)
og grundigere rengøring med
Nevotex Vinylrens (3%)



TOFI Products ApS
Græsted Stationsvej 38A - DK 3230 Græsted.
TLF. 48 39 24 30 - 21 66 09 30

Hjemmeside : www.tofistol.dk
E-mail : info@tofistol.dk

Over 10 års erfaring med gennemtestning
og udvikling af professionelle patientstole

MODEL 2010

TOFI Patientstol type AA



Patientstol i nyt design

Forbedret ergonomisk komfort:

- Tilpasning af nakkestøtte
- Ny lændestøtte
- Armlænsjustering
- Nye benstøtter kan spredes, forlænges, og hæves til lægstøtte
- Rengøringsvenligt design med formet betræk uden syninger
- Elektrisk regulering af sædetilt
- Elektrisk bremse, så stolen kan fastholdes i alle positioner
- Patientløft op til 250 kg
- Automatisk afbrydelse af benstøtte og søjle v. overbelastning
- Brugervenlig fjernbetjening
- Kun én synlig ledning

3 års reklamationsret
(gælder alle elektriske og mekaniske dele)



Armlæn justeres med håndhjul ca. 75mm
Afstand mellem armlæn 550 mm
Kan dog bestilles med øget bredde

TOFI stolen vist som leje



Total længde ca. 2000 mm
med udtrukne benstøtter

Hæl-/arbejdshøjde 600 - 1250 mm,
Laveste indsidningshøjde er på kun
550 mm pga. nyt anatomisk sæde

Stolen kan drejes ca. 90° til hver side
indbygget stop så den ikke kan dreje
mere end 180°

Sædetilt og indstilling af ryglæn:
Sædevinkel kan køres elektrisk
fra -4° til + 12°.

Ryglæn kan lægges ned til
Anvendelse som leje



Benstøtter kan spredes 10° til hver side



Benstøtter kan udtrækkes ca. 200 mm
Højde (lægstøtte) max. 75 mm

Tekniske data

Stolens egenvægt er ca. 135 kg
Patientløft max 250 kg
(Stol bør fastgøres til gulv ved
patientvægt over 200 kg)
Ny SA 60 Styring:
Automatisk afbrydelse af
benstøtte og søjle v. overbelastning

EI - tilslutning 220 V med jord
Kun én ledningsføring til
patientstolen (24 volt strømforsyning)